

PLANIC

사용자 매뉴얼

attibe
Beauty Care Expert

attibe
Beauty Care Expert

제조원 : (주)하이로닉
경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동) 분당수지 U-TOWER 19층

판매원 : (주)아띠뷰티
경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동) 분당수지 U-TOWER 19층

고객지원센터 1522-7599

www.attibe.com

Table of Contents

01. **사용하기 전에** 02
 사용 전 속지사항

02. **제품의 구성 및 기능** 02
 제품의 사양 / 제품의 구성 / 제품의 명칭 및 기능

03. **사용금지 및 주의사항** 04
 사용금지 / 주의사항

04. **사용 방법** 04
 전원 및 진동 ON/OFF / 사용 방법 / 권장 시술 방법 /
 사용 후 관리방법 / 제품 충전 방법 / 사용 시 주의사항

05. **자주 묻는 질문** 08
 자주 묻는 질문

06. **보증의 개요** 08
 제품 보증서 / 보증의 내용

Copyright© 2019 Attibe Beauty Corporation

본 문서에 언급된 제품은 산업재산권법과 저작권을 포함하는 다양한 국내/외 지식 재산권으로서 보호되며, 무단 복제나 사용은 주식회사 아티베뷰티로부터 서면 동의를 받지 않는 이상 금지됩니다.

01. 사용하기 전에

사용 전 속지사항

- ⚠ 본 기기(플라닉)는 반드시 물기가 없는 상태에서 사용하세요.
- ⚠ 최초 사용 전, 갈바닉 배출기능과 흡수기능을 확인하고 사용하세요.
- ⚠ 사용 후에는 깨끗하게 닦아내고 소독을 해주세요.

02. 제품의 구성 및 기능

제품의 사양

입 력 전 원	DC 5V 1A
플 라즈 마 출 력	AC 2kV~5kV (Auto Off : 5분. 모드 변경 시 재설정 됨)
갈 바 닉 출 력	DC 20V 1mA (Auto Off : 10분. 모드 변경 시 재설정 됨)
배 터 리 사 양	3.7V / 1800mAh (충전 시간 : 약 2.2 시간)
사 용 시 간	완충 시, 약 4시간 (사용 환경에 따라 이용 시간이 다를 수 있습니다.)
L E D	RGB & Mix
자 동 타 이 머	연속 사용 시, 플라즈마 5분, 갈바닉 10분 후에는 기기가 자동으로 꺼집니다.(Power Off)
크 기 (W, D, H)	50 x 50 x 200 mm

제품의 구성

본 제품은 본체 1ea, 충전용 케이블 1ea, 사용설명서 1ea로 구성되어 있습니다.


본 체



충전용 케이블



사용설명서

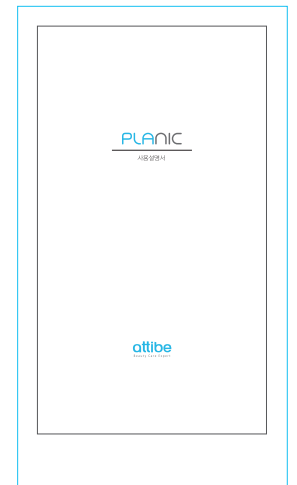

제품의 명칭 및 기능



명칭	역할
1. 플라즈마 전극	플라즈마가 출력되는 부분
2. 갈바닉 전극	갈바닉 이온이 출력되는 부분
3. LED 표시부	배터리 잔량 표시 및 제품의 동작 상태를 표시 함
4. 접지부	갈바닉 동작 시 접지부
5. 전원/모드버튼 (배터리 충전 표시등)	버튼을 2초 이상 누르고 있으면, 전원 켜짐 (→) 꺼짐 (←) 버튼 짧게 누르면 동작 모드 변경 갈바닉 배출 (ION 청록색) 플라즈마 LOW (LOW 흰색) 플라즈마 HIGH (HIGH 흰색) 갈바닉 흡수 (ION 보라색) 전원이 켜진 상태에서 짧게 2회 누르면 진동을 켜거나 끌 수 있음
6. 충전기 연결 단자	충전용 케이블을 이용하여 내부 배터리에 충전용 전원을 공급하기 위한 단자

03. 사용금지 및 주의 사항

사용금지

다음 어느 하나에 해당하는 경우 사용하지 마십시오.

- ⊘ 유아
- ⊘ 임신중인 여성
- ⊘ 금속 알러지가 있는 분
- ⊘ 전기자극에 이상 반응이 있는 분
- ⊘ 눈이나 생식기에는 절대 사용을 금지합니다.
- ⊘ 사용 권장 부위 이외의 부위에 사용을 금지합니다.

주의사항

다음과 같은 의료용 전기기기와는 절대로 함께 사용하지 마십시오.
의료용 전기기기의 오작동으로 인하여 신체에 심각한 장애 및 사고를 초래
할 수 있습니다.

- ⊘ 인공심박조율기 등의 체내 삽입형 의료용 전기기기
- ⊘ 인공 심폐 등의 생명 유지용 전기기기
- ⊘ 심전계등의 장착형 의료용 전기기기

04. 사용 방법

전원 및 진동 ON / OFF

- **전원 ON**
전면 하단의 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러
전원을 켭니다.
- **전원 OFF**
전원이 켜진 상태에서 전면 하단의 전원 버튼을
2초 이상 길게 눌러 전원을 꺼줍니다.
(5분 뒤, 자동 종료됩니다.)
- **모드변경**
전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 1회 누르면
모드가 변경 됩니다.
- **동작순서**
갈바닉 배출 (ION 청록색)
플라즈마 LOW (LOW 흰색)
플라즈마 HIGH (HIGH 흰색)
갈바닉 흡수 (ION 보라색)
- **진동 ON / OFF**
전원이 켜진 상태에서 짧게 2회 누르면 진동을
켜거나 끌 수 있습니다.





갈바닉 배출기능(노폐물 배출)
(ION LED 청록색 점등)

플라즈마 기능(낮은단계)
(LOW LED 흰색 점등)



플라즈마 기능(높은단계)
(HIGH LED 흰색 점등)


갈바닉 흡수기능(유효성분 흡수)
(ION LED 보라색 점등)

사용 방법


1. 사용할 부위를 깨끗하게 씻어주세요.
2. 얼굴부위를 사용하실 경우
세안 ▶ 갈바닉 배출기능 ▶ 토너로 노폐물제거 ▶ 플라즈마 ▶ 기초 화장품 ▶ 갈바닉 흡수기능 순서로 사용하세요.
3. 피부가 많이 건조 하신 분들은 시술 전 스킨, 토너 등을 바르고 플라즈마를 사용하셔도 됩니다.
4. 아토피 등이 심하신 분들은 플라즈마 모드를 권장합니다.
5. 플라닉은 얼굴 뿐만 아니라 다른 부위에 사용하셔도 좋습니다.
6. 플라즈마 모드는 1회 5분 이내 아침 저녁으로 하루 최대 2회 정도 사용하는 것을 권장합니다.
7. 자세한 사용방법은 제품 설명 및 사용방법 영상을 참조하여 주세요.

스마트폰의 QR코드 앱을 이용해 위의
QR코드를 찍으면 해당 영상이 재생됩니다.


권장 시술 방법

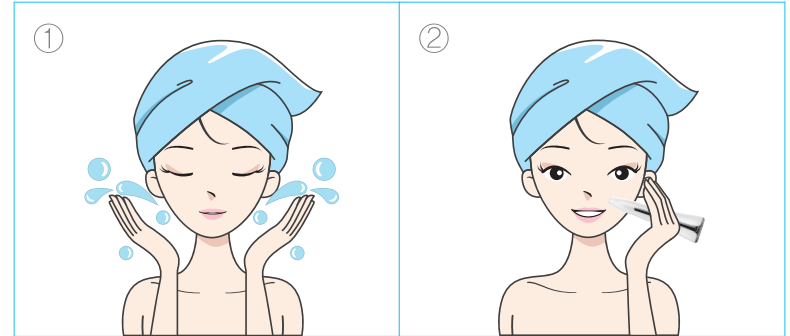


① 세안 및 물기제거
제품을 사용할 부위를 깨끗하게
닦아주세요

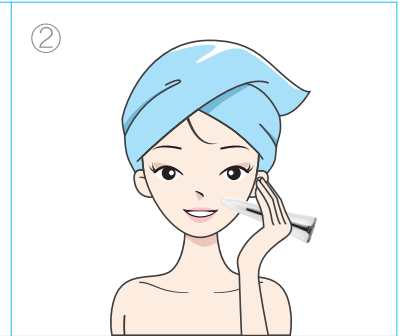


② 노폐물 배출
제품을 켜고 갈바닉 배출 모드(ION
LED 청록색 점등)로 선택 후 얼굴에
사용하세요.

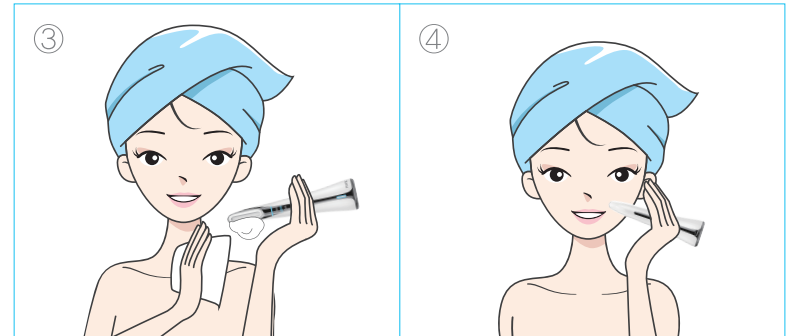

③ 노폐물 제거
얼굴과 기기의 노폐물을 깨끗하게
닦아주세요

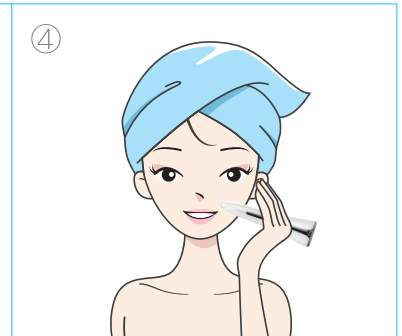

④ 플라즈마 모드사용
닦아낸 상태에서 건식으로 플라즈마
모드(흰색 점등)를 얼굴에 사용하세요

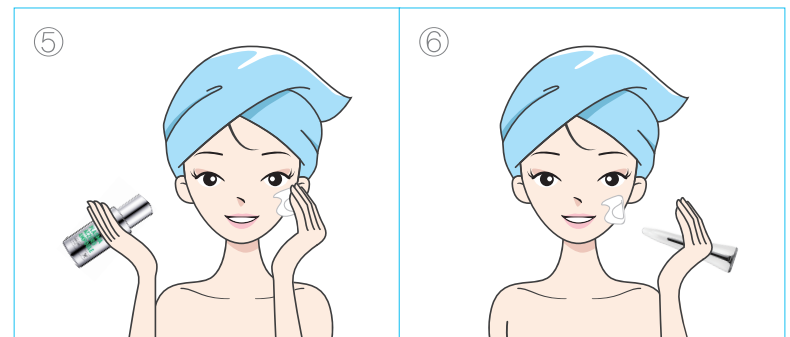

⑤ 화장품 도포
흡수시킬 화장품을 얼굴에 바르세요.



⑥ 갈바닉 흡수모드 사용
화장품을 얼굴에 도포 후 갈바닉 흡수
모드(ION LED 보라색 점등)로 흡수
시키세요.

사용 후 관리 방법

- 기기 사용이 완료되면 깨끗한 화장지나 화장솜에 소독용 알코올을 충분히 적신 뒤 플라즈마 발생부를 깨끗하게 닦아주세요.
(피부 속 노폐물이나 유분이 제품에 묻어있을 수 있습니다.)
- 알코올을 건조시킨 뒤 햇빛이 없는 건조한 곳에 보관하세요.

제품 충전 방법

- 충전 케이블 연결 시, 배터리 충전표시등(청색)이 켜지면서 충전이 시작 되고, 완충 시는 녹색이 점등 됩니다.
완충된 경우라도 잠시 사용 후 재 충전 시 완충 표시 램프가 켜 질 때까지는 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
- 본 제품은 출고 시 배터리를 약 50% 충전한 상태로 출고 되므로, 제품 구입 후 최초 개봉 시에는 반드시 배터리를 충전하여 사용 바랍니다. 자연 방전에 의해서 배터리의 용량이 많이 떨어져 있는 경우 충전 시간이 다소 오래 걸릴 수 있습니다. (약 2시간)
- 제품을 3개월 이상 충전하지 않은 상태로 방치하는 경우, 과 방전에 의하여 기기의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이런 경우 기기를 완전 충전한 후, 사용하시기 바랍니다.
- 전원이 켜지지 않거나 전원이 켜진 후 곧바로 꺼지는 상태는 배터리가 방전된 경우입니다. 이런 경우 충전 후 사용하고, 배터리가 완전 방전된 경우 충전 시간이 정상보다는 다소 오래 걸립니다.

사용 시 주의사항

- 플라즈마 사용 시 사전에 물기가 없도록 잘 닦아 주세요.
- 본 제품은 생활 방수가 되지 않는 제품으로, 기기 외부에 물 티슈 등으로 가볍게 닦는 정도는 가능하나, 물속에서 사용하거나 물 세척을 할 수 없는 제품입니다.
- 물 속에서는 절대 사용해서는 안됩니다.
- 사용시간과 사용빈도는 사용설명서의 지시사항을 준수하여 주십시오.
- 몸이나 피부에 이상을 느끼면 사용을 중지하여 주십시오.
- 사용 후에는 전원을 꼭 꺼주십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
- 본체를 절대 임의로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.
(임의 분해 한 경우 A/S 지원이 불가합니다.)
- 제품에 고장이나 이상이 있을 시는 구입한 판매처나 고객센터(1522-7599)로 연락하여 점검이나 수리를 받으시길 바랍니다.

05. 자주 묻는 질문

- 권장 사용시간은 어떻게 되나요?
- 1회 5분 하루 5분 ~ 10분 입니다.
- 사용 부위가 오염될 경우 어떻게 하나요?
- 사용부 주위를 부드러운 천을 이용하여 닦아 줍니다.
- 플라닉 사용 중 나는 냄새는 괜찮은 건가요?
- 플라즈마 방전 과정에서 생기는 오존반응에 의한 것으로 정상적인 현상입니다.
- 플라닉 사용 시 소리가 나는데 괜찮나요?
- 플라즈마 동작에서 생기는 자연 현상이니 안심하셔도 됩니다.
- 심한 충격을 받은 후에 동작이 되지 않거나 오동작 할 때 어떻게 하나요?
- 고객센터로 문의 바랍니다. (1522-7599)

06. 보증의 개요

품질 보증 기간

- 제품 및 부품 : 구입일 이후 12개월 까지 (배터리 제외)
- 배터리 : 구입일 이후 6개월 까지, 제조일 이후 9개월 까지.

무상 보증

- 무상보증서비스 요청 시 신청자는 제품의 문제점을 확인하기 위한 사진이나 동영상 등을 (주)아띠베뷰티에 제공해야 합니다.
- 제품의 손상 내용과 원인(고객 과실을 포함함)을 판단하는 것은, 원칙적으로 (주)아띠베뷰티의 책임과 권리입니다.

무상 보증 제외 사항 (유상 A/S 수리 가능)

- 사용자가 제품을 의도된 목적 외로 사용하거나 기기를 무단 변경/해체/분해한 경우 무상 보증에서 제외됩니다.
- 제품의 지속적인 유지를 위한 소모성 부품은 무상보증에서 제외됩니다.
- 사용자 부주의에 의한 파손이나 망실 시, 무상 보증에서 제외됩니다.
- 본체의 분해 또는 충격으로 인한 손상, 본체에 무리한 힘을 주어 발생한 파손이나 (주)아띠베뷰티의 인증을 받은 서비스 요원이 아닌자가 임의로 장비를 분해, 수리 또는 위/변조한 경우 무상보증에서 제외됩니다.
- 제품 일련번호 등 제품정보 확인이 불가할 경우 무상보증에서 제외됩니다.

유상 수리 기준 (부가세 별도 기준)

수리비 : 별도의 A/S 수리비 기준표에 의하여 책정함.
 부품 교체비 : 별도의 부품별 단가표에 의함.
 배송비 : 택배비 / 운송료 청구 또는 착불 배송.

수리비 정산 및 고객 확인

A/S 유상 수리 대상인 경우에는 고객에게 수리비 / 부품비 / 배송비 등, 관련 비용 발생 가능성을 사전에 고지해야 합니다.

제품 수리작업 시작 전에 고객에게 고장 부위 및 관련 비용의 사전고지, 고객의 승인 및 수금까지 완료 후 수리작업을 진행합니다.

책임의 제한

소비자의 부주의에 의한 제품 훼손이나, 관리 부주의로 인한 파손 및 품질보증 기간이 경과한 제품의 품질 이상에 대해서는 보상의 책임을 지지 않으며, 다만 수리 가능 시에는 본사에서 유상으로 수리해드립니다.

소비자는 사용 전 [사용방법]과 [금지사항, 주의사항] 등, 사용자 매뉴얼을 필독 후 사용 하시기 바랍니다. 당사에서 공급하는 제품을 허가 받지 않은 사람이 임의적인 변경, 재사용 시 발생하는 모든 문제에 대해서는 사용자가 법적인 책임을 갖게 되며, 이와 관련 하여 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

시술자 부주의로 발생된 피해는 어떠한 경우에도 당사에서 책임지지 않습니다.

A/S 처리 기준

	구분	품질보증 기간 이내	품질보증 기간 이후
제품 자체의 결함으로 인한 고장	운송과정에서 발생 또는 최초 사용 시 발견된 파손, 결함	제품 교환	
	제품 구매 1개월 이내의 중대한 결함 발생 또는 중요 부품의 고장	무상 수리 (요청 시 제품 교환)	
	지속적인 사용이나 통상적인 진행성 결함으로 수리가 필요한 경우	무상수리	유상 수리
	구매일 90일 이내에 같은 원인에 의한 3회 이상의 반복적인 고장	제품 교환 또는 환불	유상 수리
소비자 과실의 파손 및 고장	수리 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 고객 부담 시, 제품 교환 가능	
기타 원인에 의한 고장	천재지변 (화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생했을 경우	유상 수리	
	사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량 으로 인하여 고장이 발생했을 경우		
	당사 지정 서비스직원이 아닌 사람이 수리 및 개조 하여 고장이 발생한 경우		
	기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우		

PLANIC 정품 보증 서비스를 제공받기 위해 이메일을 통해 아래 내용과 기기를 등록해 주시기 바라며, 무상보증 기간은 구매일로부터 1년입니다.
 1년 경과 이후에는 유상 A/S를 제공합니다.

보증서

구 입 일 :

성 명 :

주 소 :

연 락 처 :

휴 대 폰 :

E-mail :

제 품 명 : PLANIC

Serial No. :

판매자 / 회사 :

판매자 연락처 :

중 요

보다 효과적인 보증을 위하여 위의 내용을 E-mail(cs@attibe.com)로 전송하여 주시기 바랍니다. (단, 담당자와 연락이 되었다면 팩스 전송도 가능합니다)